

Produits chimiques

Pour le traitement de l'instrumentation dentaire
en laveurs-désinfecteurs Miele



Gamme ProCare Dent

Une solution globale

Miele propose un package complet pour le traitement des instruments dans les cabinets dentaires. Chaque laveur-désinfecteur est mis en service par des techniciens Miele ou des partenaires agréés qui sont formés selon les exigences des normes en vigueur. Lors de ces mises en service, le fonctionnement des appareils est expliqué de manière approfondie. Cette offre de service est désormais complétée par les produits chimiques ProCare Dent contribuant à un traitement efficace de l'instrumentation dans les laveurs-désinfecteurs Miele. Grâce à cette solution complète, les cabinets dentaires peuvent se prévaloir d'une fiabilité sans faille.



Lavage/Désinfection
Stérilisation
Traçabilité
Garantie

ProCare Dent

Les produits ProCare Dent sont adaptés aux appareils Miele. Ils permettent d'obtenir des résultats de nettoyage et de désinfection efficaces tout en prenant soin des instruments. Ainsi les instruments dentaires sont toujours traités à la perfection, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Manipulation simple et sécurisée

Le code couleurs des différents produits ProCare assure une manipulation simple et évite ainsi les risques de confusion de produits.



Recommandations concernant le traitement au quotidien des instruments standard

Programme : Vario TD
Lavage : détergent liquide ProCare Dent 10 A
ou détergent en poudre ProCare Dent 11 A
Neutralisation : ProCare Dent 30 P
Rinçage final : ProCare Dent 40



Recommandations concernant le traitement au quotidien des instruments standard et rotatifs

Programme : Vario TD
Lavage : détergent liquide ProCare Dent 10 MA
Neutralisation : ProCare Dent 30 C
Rinçage final : ProCare Dent 40


| Produit | Description | Indications spécifiques | Marquage des composants, conformément à VO (EG) 648/2004 | Capacité |
|-----------------------------|---|--|--|---|
| Lavage | | | | |
| ProCare Dent 10 MA | Détergent à alcalinité moyenne, concentré liquide | <ul style="list-style-type: none"> • Protection élevée des matériaux • Particulièrement adapté pour l'instrumentation rotative | <ul style="list-style-type: none"> • < 5% de tensioactifs • Enzymes | Bidon de 5 l |
| ProCare Dent 10 A | Détergent alcalin, concentré liquide | <ul style="list-style-type: none"> • Performance de lavage élevée • Inadapté à l'instrumentation rotative | <ul style="list-style-type: none"> • 15 – 30% phosphates | Bidon de 5 l |
| ProCare Dent 11 A | Détergent alcalin, poudre | <ul style="list-style-type: none"> • Performance de lavage élevée • Inadapté à l'instrumentation rotative | <ul style="list-style-type: none"> • < 5% de tensioactifs • > 30% phosphates | Seau de 10 kg |
| Neutralisation | | | | |
| ProCare Dent 30 C | Produit de neutralisation acide, concentré liquide | <ul style="list-style-type: none"> • Particulièrement adapté à l'instrumentation rotative • Sur une base d'acide citrique | <ul style="list-style-type: none"> • Acides organiques | Bidon de 5 l Flacon d'1 l (avec raccord de remplissage) |
| ProCare Dent 30 P | Produit de neutralisation acide, concentré liquide | <ul style="list-style-type: none"> • Inadapté à l'instrumentation rotative • Sur une base d'acide phosphorique • Elimine les décolorations d'oxydation et les salissures solubles à l'acide | <ul style="list-style-type: none"> • 15 – 30% de phosphore anorganique (extrait d'acide phosphorique) | Bidon de 5 l Flacon de 1 l (avec raccord de remplissage pour G 7831) |
| Rinçage final | | | | |
| ProCare Dent 40 | Produit de rinçage final, concentré liquide | <ul style="list-style-type: none"> • Séchage optimisé et raccourci | <ul style="list-style-type: none"> • <5% de phosphates • 15 – 30% de tensioactifs • Conservateurs (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone) | Flacon de 1 l (avec raccord de remplissage) |
| Régénération | | | | |
| ProCare Universal 61 | Sel spécial à gros grains pour la régénération de l'adoucisseur interne | <ul style="list-style-type: none"> • Empêche les dépôts de calcaire et protège les instruments | | Paquet de 6 kg (3 x 2 kg) |

Déroulement du programme Vario TD

dans un laveur-désinfecteur Miele

L'utilisation des produits ProCare Dent pour les différentes phases de lavage est adaptée aux instruments thermostables, conformément à la norme EN ISO 15883. L'utilisation du ProCare Dent 10 MA, détergent à alcalinité moyenne et du ProCare Dent 30 C, produit de neutralisation est particulièrement recommandée pour les instruments plus fragiles tels que l'instrumentation rotative. Avant le traitement en laveur-désinfecteur, il est conseillé d'éliminer au maximum les gros des résidus (ciment dentaire etc.)

Les produits ProCare Dent sont validés pour les différentes phases du cycle et complètent ainsi l'offre Miele.

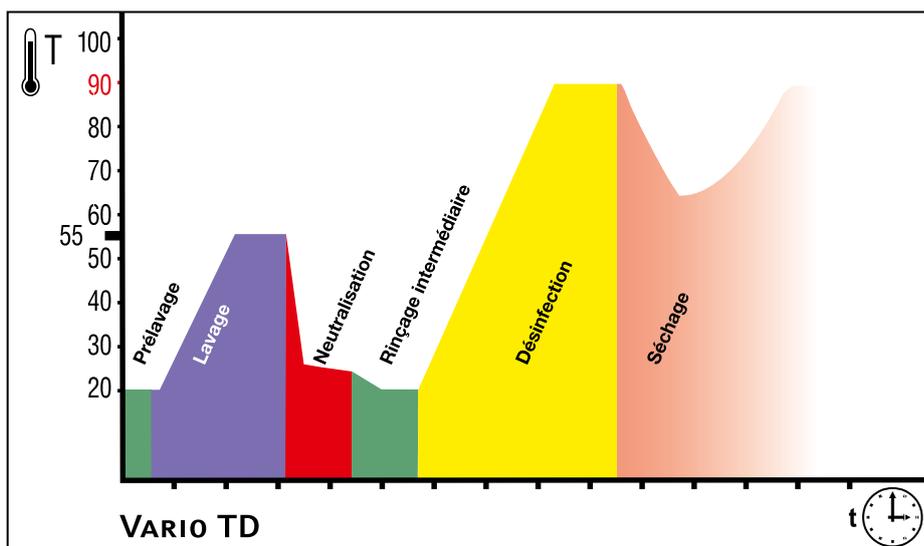

France

Miele S.A.S
9, Avenue Albert Einstein
Z.I. du Coudray
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
Téléphone +33(0)1/49 39 34 35
Téléfax + 33(0)1/49 39 44 38
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Centre de contact technique professionnel

N° audiotel : 0892 222 150
0,34 € TTC/min
savpro@miele.fr

Pièces détachées et accessoires
N° audiotel : 0892 68 70 35
0,34 € TTC/min

adv.prof@miele.fr
www.miele-professional.fr

Belgique

Miele Belgique S.A.
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9
1730 Mollem (Asse)
Téléphone +32(0)2 451 15 40
Téléfax +32(0)2 451 15 29

Service après-vente

Téléphone +32(0)2 451 16 16
Téléfax +32(0) 451 14 14
de 8h-20.h sans interruption

infopro@miele.be
www.miele-professional.be

Luxembourg

Miele S.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352/4 97 11-25
Téléfax +352/4 97 11-39

infolux@miele.lu

Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0)56 417 27 51
Téléfax +41 (0)56 417 24 69

Service après-vente

Téléphone +41 (0)800 551 670

info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Des solutions professionnelles



Buanderie et accessoires

pour l'hôtellerie, la restauration, les maisons de retraite, les pressings



Lave-vaisselle professionnels

pour l'hôtellerie, la restauration, les offices



Laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs

pour les cabinets dentaires et hôpitaux



Laveurs-désinfecteurs

pour hôpitaux, cliniques et laboratoires



Laveurs-désinfecteurs, cabines de lavage, grands stérilisateurs

pour les stérilisations centrales



Service

Prestations de service après-vente